



Produktkatalog 2024-2025



Affärsidé

INSYN ska med bred kompetens tillhandahålla och anpassa datalösningar till privatpersoner, företag och organisationer med specialisering på synskadade.

INSYN ska genom långsiktiga relationer, nära samarbete och partnerskap effektivisera och optimera kundens investering. För att anpassa oss till kundens behov och krav samarbetar vi med alla aktörer på marknaden för att ge en produktberoende lösning.

INSYN arbetar för att alla människor, oavsett funktionshinder, ska ha en självklar plats i vardagen, skolan och på arbetsmarknaden.

Vi hjälper gärna till när det behövs en utredning om vad som kan behövas på en arbetsplats.

Vi kommer gärna till dig och visar produkter eller bokar du en tid och besöker oss.

Produkter

Vi levererar allt från småsaker till kompletta lösningar. Allt från datorer med kringutrustning, hjälpmedel, installation samt utbildning.

Datorer, bildskärmar, skrivare och standardprogram har vi inte med i katalogen. Vi har även ett brett sortiment av optik. Kontakta oss för information !

Köpinformation

Priserna i denna katalog är i SEK och exklusive moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och eventuella tryckfel.

Hyra

Vi hyr gärna ut utrustning hjälpmedel och datorer när de behövs för en kortare tid eller om det är osäkert vad en användare behöver. Månadskostnaden 12% av köpesumman. Vid friköp av utrustningen dras 65% av erlagd hyra av från priset.

Vi hyr inte ut installation, utbildning och standardprogram.

Kontakta något av våra kontor för mer information om hyresvillkor.

Alla priser i katalogen är exklusive moms

Innehållsförteckning

Belysning - Förstoring

Daylight IQ Magnifier	4
Daylight Omega 5	4
Luxo LFM LED	5
Luxo Wave LED	5

Belysning - Golv

Waldmann Lavigo Golv LED	6
--------------------------	---

Belysning - Portabel

Daylight Twist2 GO	7
--------------------	---

Belysning - Skrivbord

Daylight Lumi	8
Daylight Luminos	8
Daylight Tricolor	10
Waldmann Taneo LED	11

Data - Tangentbord

Logic XLPrint Braille PC	12
Logic XLPrint Braille Storstil PC	12
Logic XLPrint NERO PC	13
Logic XLPrint Astra PC & MAC	14
ZoomText Logic tangentbord	15

Ergonomi

Läsbord med linjal	16
Läsbordskiva JL-88	17
Monitorarm SPACE Anyway	18

Handhållna läskameror

Looky 7 HD	19
Looky 10 HD	20
Ruby 4 HD	21
Ruby 5 XL HD	21
Ruby 7 HD	22
Ruby 10 HD	23

Handhållna läskameror - OCR

Ruby 10 HD OCR	24
----------------	----

Hjälpmedelsprogram

ZoomText Magnifier	25
ZoomText Mag/Reader	26
Jaws PRO	27
Fusion PRO	28
OpenBook och Pearl	29
TangoTouch	30
CX Word Förenklad	30

Läskamera - Datakopplad

VisusMove FHD	32
---------------	----

Läskamera - Mikroskop

Visus CMORE PLUS	33
Visus ICON	34
Visus ICON TURN+FLEX	35

Läskamera - OCR

Acuity FHD med tal	36
--------------------	----

Läskamera - Portabel

i-loview 13 FHD	37
i-loview 16 FHD	37
i-loview 16 FHD Premium	38
i-loview MAX FHD Premium	38
Onyx HD 22	39
VisioDesk HD	40
VisioBook HD	40

Läskamera - Skollösning

myBoardBuddy AIR	41
myBoardBuddy GO	42
Visus Distance AVK	43

Läskamera - Stationär

Merlin Ultra 22	44
Topaz FHD 22	45

Läsmaskin

i-Reader 2	46
OrCam Read PRO	47
OrCam MyEye PRO	48
OrCam MyEye Smart	48
SmartReader HD	49

Punktdisplay med taktil grafik

DotPad 320	51
DotPad 320	52

Punktdisplay

Focus 14 Blue V5	53
Focus 40 BU V5	54
Focus 40 Blue V5	55
Focus 80 Blue V5	56
	58
Orbit Reader 40	59
Vario 440	60
Vario 464	61
Vario 480	62
VarioUltra 20	62
VarioUltra 40	63
VarioPro 80	

Punktskrivare

6DOT Präglingsbox	64
Index Everest-D V5	65
Index Basic-D V5	66
Index BrailleBox V5	67
ViewPlus Delta 2	68
Viewplus SpotDot	69

Punktskrivmaskin

Mountbatten Brailleur Tutor	70
-----------------------------	----

Swällpapper

Harpo PIAF	71
------------	----



Daylight iQ Magnifier

Ergonomiskt utformad så att huvudet kan röra sig fritt och hålla valfri position. Utrustad med en lätt akryllins med 3 dioptrier (1,75 x) förstoring och rep-skydd. 12 dioptrier svängarmslins ingår.

- Fri rörlig huvudled
- Akryllins Ø 17,5 cm med repskydd
- 4 ljusstyrkor:
6.300 - 5.500 - 3.500 - 1.800
- Förstoring 3 dioptrier (1,75x)
- Ytterligare förstoring 12 dioptrier (4.0x) svängarmslins ingår
- Löstagbart linsskydd
- Täckta armar med inre fjädrar
- Lång räckvidd 118 cm
- Ljuskälla: LED
- Lumen: 814
- Lux vid 15 cm: 6 300
- Energiförbrukning: 12W
- Färg: mörkgrå / vit
- H x b x d: 60 x 23 x 90 cm



Daylight Omega 5

Omega 5 har en glaslinns på 12,7 cm med 3 dioptrier (1,75 x) förstoring. Ytterligare en 5 dioptrier (2,25 x) förstoringsslinns medföljer. Den levereras med 4 ljusstyrkenivåer som passar dina behov. Den inre fjäderarmen möjliggör exakt positionering.

- Glaslins
- Lins Ø 12,7 cm (5 ")
- 3 dioptrier (1,75x) och 5 dioptrier (2,25x) linser ingår
- 4 ljusstyrkor
5500 – 4000 – 2500 - 1700
- Lång räckvidd 106 cm
- Ljuskälla: LED
- Lumen: 548
- Lux vid 15 cm: 5500
- Energiförbrukning: 11W
- Färg: ljusgrå / vit
- H x b x d: 58,5 x 18 x 78 cm

ArtNr	Benämning	Pris	ArtNr	Benämning	Pris
8-125100	Daylight iQ Magnifier	3 640:-	8-125110	Daylight Omega 5	2 200:-



Luxo LFM LED

LED är lika väl lämpad för professionellt bruk som för synskadade och andra med behov av exakt förstoring. Den låga vikten gör den enkel att flytta runt.

- Ljuskälla: LED
- Levereras med: Bordsfäste
- Förstoring 3 dioptrier (1,75x) eller 5 dioptrier (2,25x).
- Linsdiameter: 127mm.
- Färger: Vit
- Dimmer: 3-steps dimmer (0-50-100%)
- Armlängd: 1050 mm



Luxo Wave LED

Wave LED är en förstoringslampa. Wave LED erbjuder skuggfri förstoring med ljus som kommer från båda sidor, samt tredimensionell förstoring med ljus som kommer från vänster eller höger.

- Ljuskälla: LED
- Levereras med: Bordsfäste
- Förstoring 3 dioptrier (1,75x) eller 5 dioptrier (2,25x).
- Kronglaslins.
- Linsdimension: 175x108 mm
- Färger: Vit
- Dimmer: Ja. 0-50-100 %
- Timer: Ja, ljuset stängs automatiskt av efter 4 alternativt 9 timmar
- Armlängd: 1050 mm

ArtNr	Benämning	Pris	ArtNr	Benämning	Pris
8-8028194	Luxo LFM LED 840 3 D	2 132:-	8-8025948	Luxo Wave LED 840 3,5 D	5 069:-
8-8028195	Luxo LFM LED 840 5 D	2 385:-	8-8025950	Luxo Wave LED 840 5 D	5 357:-



Waldmann Lavigo Golv LED

Waldmanns flexibla golvarmaturer är en oslagbar lösning för såväl det individuella kontoret som det öppna kontorslandskapet. Finns i flera utföranden för perfekt tillämpning. Med vår 'intelligenta automatik' skapar man enkelt förutsättningar för en unik kombination av belysning, ergonomi och energibesparing.

- Individuell justering av direkt och indirekt ljus.
- 372 LED, med Neutralvitt ljus 4000K
- Steglöst dimbar.
- Närvaro och dagljusstyrning PIR.
- Lumen: 14 050 lm.
- Effekt: 102-112 W.
- Bländskydd: Prismabländskydd.
- Vikt: 19.6 Kg.



ArtNr	Benämning	Pris
8-5725995-4	Lavigo Golv 14000/840/R/G2 PIR 4000K	12 700:-
8-5803269	Lavigo Golv 14000/840/D/G2 4000K	11 400:-



Daylight Twist2 GO

Minska ögonbelastningen när du utövar hobbyer och vardagliga sysslor med Twist 2 Go. Bärbar, uppladdningsbar och kompakt, lys upp ditt utrymme var du än är med denna robusta lampa.

Ergonomiskt utformad för att vara lätt att bära med en hand, de krickfärgade ränderna på varje sida av lampan säkerställer ett enkelt grepp och du vet alltid hur mycket batteri du har kvar genom att titta på batterinivåindikatorn. Easy Twist Shade™ gör att ljuset kan placeras och riktas precis där du behöver det medan ljusstyrkan på dagsljuslysdioderna kan justeras med den taktila 3-stegs dimmerknappen. De högkvalitativa lysdioderna och CRI på över 95 ger hög kontrast och klarhet, vilket gör detaljer synliga och färger återgivna korrekt.

- Ljuskälla: LED
- Lumen: 350
- Luxutgång vid 30 cm: 1 500/1 000/600
- Ljus färgtemperatur: 6 000K
- Energiförbrukning: 5W
- Produktfärg: Vit/Turkos
- Maximal räckvidd: 26 cm
- Produktvikt: 1,0 kg
- Kabellängd: 1,5m
- CRI: 95+
- Batteriladdningstid: cirka 6 timmar att ladda helt
- Batteridriftstid: upp till 8 timmar med lägsta ljusstyrka, upp till 3 timmar med högsta ljusstyrka

ArtNr	Benämning	Pris
8-135090	Daylight Twist2 GO	1 100:-



Daylight Lumi

Lumi är mångsidig, ljus och kraftfull och har en stor nyans som kan justeras vertikalt, horisontellt och i sidled till önskad position. Lumi är en professionell arbetsstationslampa som gör att du kan se fina detaljer och riktiga färger.

- Bred nyans för en jämn spridning av ljus över ett stort område
- 2 ljusstyrkor 3 800 och 1 750 Lux
- Multipositionshuvud för att rikta ljuset där det behövs
- Lång räckvidd 100 cm
- Ljuskälla: LED
- Lumen: 1320 lm
- Färgtemperatur: 6000 K
- CRI: 80+
- Energiförbrukning: 15W
- Färg: vit
- LED -märkt liv (timmar): 50 000
- Höjd: 58,5 cm Bredd: 51 cm Djup: 70 cm
- Vikt: 2 kg
- Kabellängd: 2,1 m



Daylight Luminos

Luminos är den ljusaste i dagsljusområdet och erbjuder en mycket hög ljusstyrka och en exceptionellt stor spridning av ljus. Perfekt för att belysa ett stort område. Dess ergonomiska design gör att du enkelt kan placera och vinkla skuggan där det behövs. Extra lång räckvidd, extra ljus, extra motståndskraftig.

- 3 ljusstyrkor 3800, 2300 och 1200 Lux
- Fri rörelsehuvud och arm för perfekt positionering
- Mycket lång räckvidd 112 cm
- Ljuskälla: LED
- Lumen: 1 566
- Lux vid 30 cm: 3800
- Färgtemperatur: 6000 K
- CRI: 80+
- Energiförbrukning: 20W
- Färg: mörkgrå & vit
- Höjd: 60 cm Bredd: 65 cm Djup: 75 cm
- Vikt: 3,2 kg
- Kabellängd: 2,4 m

ArtNr	Benämning	Pris
8-135500	Daylight Lumi	1 520:-
8-135600	Daylight Luminos	2 880:-



Daylight Tricolor

Designad med djärva och synliga strömbrytare, är den estetiskt tilltalande Tricolor-lampan lätt att använda och lätt för ögonen. Med ett urval av färgtemperaturer och justerbar ljusstyrka(dimmer), hitta de bästa inställningarna som passar din syn.

Med ett stort lamphuvud på 16,5 cm och jämnt spritt ljus möjliggör Tricolor bordslampan en exceptionell, skuggfri spridning av ljus. Perfekt för uppgifter som kräver uppmärksamhet på detaljer eller exakt färgmatchning, du kan välja mellan dagsljus 6000K, kallt ljus 4000K och varmt ljus 2700K för att se vilken färgtemperatur som fungerar bäst för dig. Perfekt för användning på ditt skrivbord, vid din säng eller i ditt kök, matsal eller hobbyrum.

- Val av dagsljus 6000K, kallt ljus 4000K och varmt ljus 2700K
- 95+ CRI för att se färger exakt när som helst på dagen eller natten
- Stort lamphuvud med diameter på 16,5 cm
- Djärva, synliga och taktila omkopplare
- Justerbara armar och skugga möjliggör perfekt positionering
- Jämnt spritt ljus eliminerar skuggor
- Ljuskälla: LED
- Lux -utmatning vid 30 cm: 3 500
- Energiförbrukning: 15W
- Produktens färg: Vit
- Maximal räckvidd: 56 cm
- Produktvikt: 2 kg
- Kabellängd: 1,5 m

ArtNr	Benämning	Pris
8-145200	Daylight Tricolor	1 460:-



Waldmann Taneo LED

TANEO är utrustade med inställbar vit färgtemperatur, något vi kallar för Tunable White. Möjlighet att justera färgtemperaturen är ofta uppskattat av personalen

Varmvit? Neutralvit? Dagsljus? Användaren bestämmer! Med TANEEO Tunable White kan färgtemperaturen enkelt och kontinuerligt justeras mellan 3000 K, 4000 K, 5000 K och 6500 K.



För bästa synförhållande förblir färgåtergivning utmärkt med Ra > 90

Homogent ljus fritt från skuggor, reflekterad bländning och flimmer, utan IR- och UV-komponenter. Kontraster är tydligt synliga och färger återges optimalt

Steglös dimmer på samtliga modeller.

Bordklämma TK3 ingår.

ArtNr	Benämning	Pris
8-5810081	Taneo TND 1400/398 mm, Tun White Prisma	6 800:-
8-5810093	Taneo TND 2100/577 mm, Tun White, Prisma	7 720:-
8-5014904	Bordsklämma TK3	472:-



Logic XLPrint Braille PC SE

LogicKeyboard har designat ett innovativt tangentbord med uppmärkning i 8-punktpunktskrift för synskadade. Detta tangentbord hjälper gravt synskadade att skriva, hitta och navigera på ett tangentbord i punktskrift. Det kan också hjälpa användare lära sig punktskrift snabbare. Tangentbordet med punktskrift är unikt utformat för att vara otroligt hållbart.

Produktspecifikationer

- Tangentbord med 8-punktpunktskrift
- Kompatibel med Windows 7 - 11
- 2 inbyggda 2.0-portar
- Kabelansluten USB
- sladdlängd 1,5 meter
- Antal tangenter 105

Mått

- Längd 446 mm
- Bredd 141 mm
- Höjd 23 mm
- Vikt 840 g

Logic XLPrint Braille Storstil PC SE

LogicKeyboard har designat ett innovativt tangentbord med uppmärkning i 8-punktpunktskrift och storstil för synskadade. Detta tangentbord hjälper gravt synskadade att skriva, hitta och navigera på ett tangentbord i punktskrift. Det kan också hjälpa användare lära sig punktskrift snabbare. Stora tydliga tecken och bokstäver med tangenter som är lätta att trycka ner.

Produktspecifikationer

- Tangentbord med 8-punktpunktskrifts-märkning och storstil
- Kompatibel med Windows 7 - 11
- 2 inbyggda 2.0-portar
- Kabelansluten USB - sladdlängd 1,5 meter

Mått

- Längd 446 mm
- Bredd 141 mm
- Höjd 23 mm
- Vikt 840 g

ArtNr	Benämning	Pris
1-9500	XLPrint Braille PC tangentbord SE	3 200:-
1-9501	XLPrint Braille-Storstil PC tangentbord SE	3 800:-



Logic XLPrint NERO PC

Snyggt, slimmat tangentbord med stora tydliga tecken och bokstäver med tangenter som är lätta att trycka ner. Enkelt att installera och använda. Ingen programvara behövs.

- Soft touch tangenter.
- 2 USB Hub: inbyggd 2.0 port för möjlighet till ytterligare USB-tillbehör.
- Windows kompatibelt: Windows 7, 8, 10, 11.
- USB kabel, 1,5 meter.
- LED lampa på Goesneck medföljer, ansluts via USB uttag.

ArtNr	Benämning	Pris
1-9521	XLPrint NERO Vit på Svart	1 600:-
1-9522	XLPrint NERO Svart på Gul	1 600:-
1-9523	XLPrint NERO Svart på Vit	1 600:-
1-9524	XLPrint NERO Gult på Svart	1 600:-



Logic XLPrint Astra PC

Astra har en attraktiv modern tangentbordsdesign. Tangenterna är belysta från insidan av tangentbordet så det finns inget behov av en lampa.

- Dimbar bakgrundsbelysning med 5 justeringsnivåer.
- Dubbla inbyggda USB-portar.
- Windows kompatibelt: Windows 7, 8, 10, 11.

Logic XLPrint Astra MAC

Astra har en attraktiv modern tangentbordsdesign. Tangenterna är belysta från insidan av tangentbordet så det finns inget behov av en lampa.

- Dimbar bakgrundsbelysning med 5 justeringsnivåer.
- Dubbla inbyggda USB-portar.
- Windows kompatibelt: Windows 7, 8, 10, 11.



ArtNr	Benämning	Pris
1-9520	Logic XLPrint Astra PC bakgrundsbelyst	1 600:-
1-9510	Logic XLPrint Astra MAC bakgrundsbelyst	1 600:-




ZoomText Logic tangentbord

ZoomText tangentbord har stora och tydliga tangenter och passar därför alla som har problem med att hitta tecknen på ett vanligt tangentbord. Finns i utföranden med svarta tecken på gul botten, eller vita tecken på svart botten.

ZoomText Tangentbordsprogram medföljer som gör att du kan styra ZoomText olika funktioner med F-tangenterna. Du får då snabb åtkomst till olika funktioner i ZoomTexts programvaror. Använd t ex funktionstangenterna för att snabbt utföra olika kommandon. som t ex att öppna ZoomText, ändra förstöringsnivå, växla mellan olika skärmförbättringslägen m m. Du kan också lägga till dina egna funktioner för ZoomText eller t ex olika kommandon för din webbläsare. ZoomText .

Dessutom finns det 2 st extra USB portar för att enkelt kunna ansluta mus, usb-minne, laddning iphone m.m.

ArtNr	Benämning	Pris
3-2210	ZoomText Logic tangentbord svart/gul	1 600:-
3-2215	ZoomText Logic tangentbord vit/svart	1 600:-

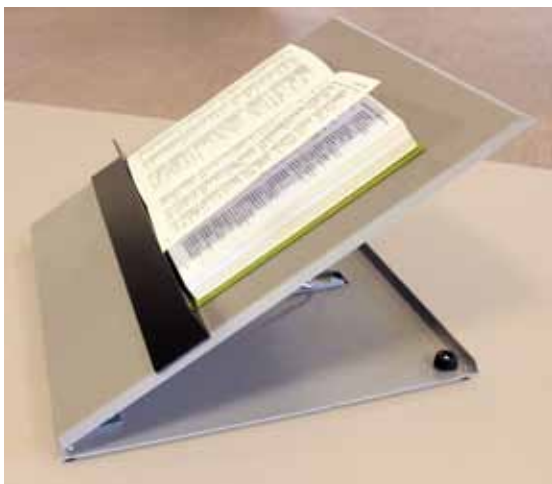

Läsbord med linjal

Svenska producerade läsbord av högsta kvalitet.


Åtta olika steg för justerar läsvinkel och ger den perfekta ergonomiska positionen.

Inkluderar löstagbar magnetisk linjal.

Läsbordet kan vikas ihop, så att det är platt och kan förvaras.

Stativet är tillverkat av solid metall och frostat så att den inte reflekterar ljus.

- 40 cm på bredden och 45 cm i höjd.
- 8 steg justerar läsvinkel.
- Vikt: 5,5 kg.
- Grå reflexfri färg.

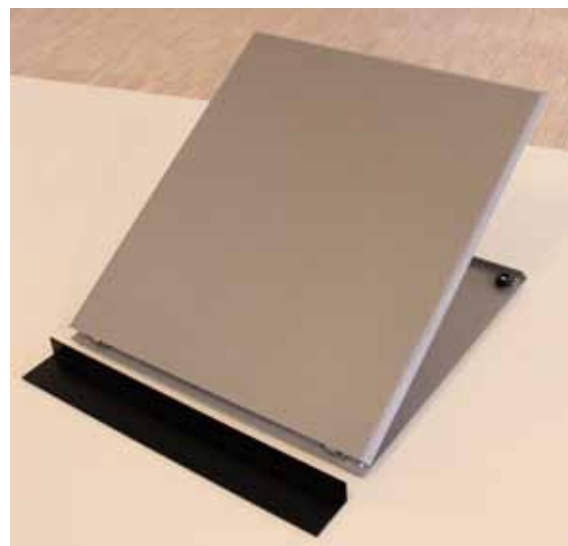

ArtNr	Benämning	Pris
9-9055	Läsbord inkl. linjal	1 800:-



Lässkiva JL-88

Skivans stativ är tillverkat av hållbart stål som garanterar att den håller länge.

Nederst på stommen finns fyra kraftiga sugkoppar som ser till att skivan sitter ordentligt vid bordet. Tack vare sugkopparna är det möjligt att luta sig mot skivan medan man läser eller ritar. JL-kalustes lässkivor har manuell justerbar vinkling så skivan kan justeras efter individuella behov. Med rätt vinkel uppnås en bra ergonomisk position och texten kan placeras tillräckligt nära.

Med hjälp av bokhållarna kan texten justeras så att den ligger på rätt läshöjd. Tack vare filtukdden nederst glider bokhållaren jämnt längs skivan så det är lätt att justera rätt läshöjd.

När rätt höjd har uppnåtts kan bokhållaren låsas fast på önskad nivå med en justerskruv. Skivans yta är tillverkad av lättrensjord ljusgrön plywood. Tack vare den mellanliggande metallskivan kan texten som ska läsas fästas på skivan med två kraftiga magneter. Skivan har även lackade björklister.

ArtNr	Benämning	Pris
9-9188	Lässkiva JL-88 50x45 cm	4 290:-
9-9199-01	Linjal till JL-88 lässkiva	480:-
9-9188-02	Magnet till JL-88 lässkiva	40:-



Monitorarm SPACE Anyway


2-ledad monitorarm med flexibla inställningsmöjligheter.

Höj, sänk och vinklinsbar ger möjlighet till individuell och ergonomisk arbetsställning.

Kraftig gasfjäder för vikterna (vikt på skärm)

3-10 kg

6-16 kg.

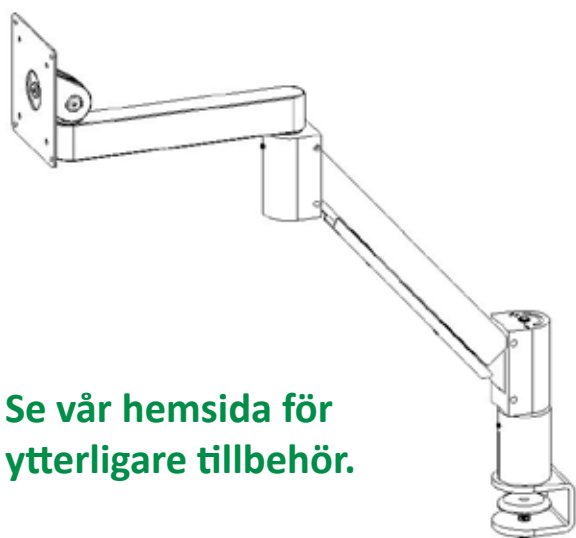

Se vår hemsida för ytterligare tillbehör.

Sedan två olika gap på fästen
(för att klara bordskiva, kant)
15-115 mm

- VESA-fäste för både 75x75 och 100x100 mm ingår.
- Svart lack.
- Kabelhållare och fästskruvar till skärm ingår.
- Kraftig gasfjäder som finns i vikterna (vikt på skärm)
3 - 10 kg
6 - 16 kg
- Sedan två olika gap på fästen
(för att klara bordskiva, kant)
15 - 115 mm

ArtNr	Benämning	Pris
7-620602-1	SPACE Anyway 15-115 mm, 3-10 kg	2 960:-
7-610102-1	SPACE Anyway 15-35 mm 6-16 kg	3 300:-
7-970000-1	Extra främre arm 220mm	422:-
7-980600-1	Bordsklämma med gap 15-115mm	422:-
7-980100-1	SPACE Bordsfäste 15-35 mm 67 mm hög	380:-
7-980705-1	Väggfäste	338:-




Looky 7 HD

Är det senaste tillskottet i den omttyckta Looky familjen av handhållna läskameror.

- 7" skärm IPS och kamera 13 MP i Full HD (1080)
- Steglös förstoring 2x -35 x med autofokus
- Färgläge och 16 hög kontrasterlägen
- Uppfällbart stativ med optimal läsvinkel
- Live panoreringläge, zooma bilderna utan att flytta kameran
- FrysBild med förflyttning, zoomning och spara möjligheter
- Drifttid 3 timmar
- Storlek 188x138x21 mm
- Vikt 420 g (inkl. batteri)

ArtNr	Benämning	Pris
1-4555	Looky 7 HD	8 800:-
1-4555-04	Looky 7 - stativ	1 280:-

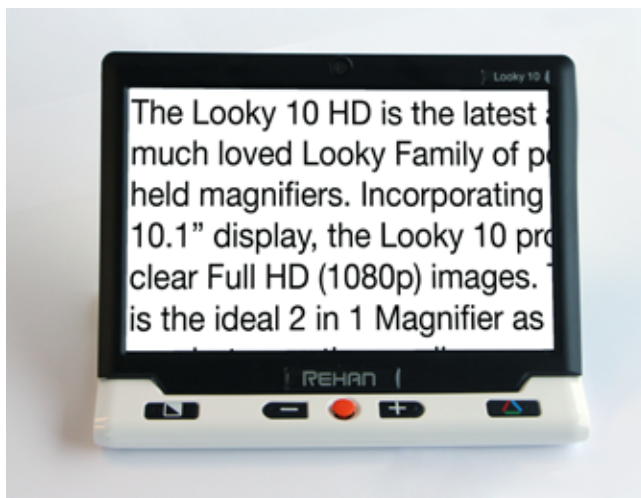

Looky 10 HD

Looky 10 HD är det senaste tillskottet i den omtyckta Looky familjen av handhållna läskameror.

- 10" skärm IPS och kamera 12Mp i Full HD kvalitet (1080).
- Steglös förstoring 2,5x – 18x med autofokus.
- Färgläge och 18 hög kontrastlägen.
- Uppfällbart stativ för optimal läs-vinkel.
- När, avstånd och spegelfunktion.
- Live panoreringsläge, zooma bilderna utan att flytta kameran.
- FrysBild med förflyttning, zoomning och spara möjligheter.
- Drifftid 3 timmar.
- Storlek 245 x 200 x 22mm.
- Vikt 680 g (inkl batteri).



ArtNr	Benämning	Pris
1-4560	Looky 10 HD	11 900:-
1-4560-01	AC adapter	380:-
1-4560-02	Batteri	750:-
1-4560-03	Väska	370:-
1-4560-04	Looky 10 - Stativ	1 280:-



Ruby 4 HD

RUBY HD ett litet portabelt elektroniskt förstoringsglas.

- 4,3" bildskärm, 5-Megapixel HD kamera med steglös förstoring från 2x upp till 13x.
- Infällbart handtag. I handtaget sitter 4st laddningsbara AAA batterier.
- Sex enkla och tydliga knappar alla placerade runt skärmen.
- 20 olika artificiella färger.
- Referens och kulisser.
- Spara upp till 80 bilder.
- Storlek: 125x75x34 mm. (17mm tjock med handtag utfällt).
Vikt: 228g.
- Driftstid 2 timmar. (2 timmars laddningstid).
- Laddare, bärväska, Rengöringsduk, och handledsrem ingår.



Ruby 5 XL HD

RUBY XL HD ett litet portabelt elektroniskt förstoringsglas.

- 5" bildskärm, 5-Megapixel HD kamera med steglös förstoring från 2x upp till 14x.
- Infällbart handtag, och inbyggt lässtöd.
- 20 olika artificiella färger.
- Referens och kulisser.
- Spara upp till 80 bilder.
- Storlek: 138x88x20 mm.
- Vikt: 300g.
- Driftstid 3 timmar.
- Laddare, bärväska, Rengöringsduk, USB kabel och handledsrem ingår.

ArtNr	Benämning	Pris	ArtNr	Benämning	Pris
1-3067	RUBY 4 HD	5 800:-	1-3059	RUBY 5 XL HD	6 800:-
1-3067-02	Laddare	480:-	1-3067-02	Laddare	480:-
1-3067-01	Batterier 4-pack	300:-	1-3059-03	Väska	325:-
1-3067-03	Väska	325:-	1-3067-04	Handledsrem	70:-
1-3067-04	Handledsrem	70:-	1-3067-06	Rengöringsduk	70:-
1-3067-06	Rengöringsduk	70:-			



Kameran kan roteras.

Ruby 7 HD

RUBY 7 HD är ett portabelt elektroniskt förstoringsglas.

- 7" bildskärm.
- HD kamera med steglös förstoring från 2x upp till 24x.
- Roterbar kamera för nära & långt avstånd. (Selfie).
- Inbyggt lässtöd.
- 20 olika artificiella färger kan väljas. (Antalet aktiva kan väljas).
- Panorering i fryst eller sparad bild.
- Bildfrysning.
- Inbyggda belysningen kan släckas vid behov.
- Spara upp till 105 bilder. (Kan flytts till PC via USB).
- Referens och kulisser.
- Storlek 190x130x20mm. Vikt 510g.
- Driftstid 3 timmar.
- Laddare, bärväska, putsduk och USB+HDMI kabel ingår.
- Enheten stängs automatisk av efter 30 minuters inaktivitet.
- När stativet fälls ut startar enheten, och stängs av när stödet fälls in.

ArtNr	Benämning	Pris
1-3068	RUBY 7 HD	8 800:-
1-3068-01	Batteri	795:-
1-3067-02	Laddare	480:-
1-3068-03	Väska	325:-
1-3067-06	Rengöringsduk	70:-



Ruby 10 HD

RUBY 10 är en handhållen läskamera med tre kameror för avstånd, läsning och en utökad arm för helsidesbildvisning.

Använd direkt ur lådan med intuitiva kontroller, inbyggt läsställ. Unika, patentsökta visningslägen förbättrar kontrasten och maximerar komforten.



RUBY 10 funktioner

- Förstoring från 2x till 24x
- Både pekskärm och taktila knappar
- Bärbar och lätt
- Förstora små föremål och finstilt text
- Se objekt på kort avstånd
- Spara skannade bilder och dokument
- Anslut till en extern skärm via Miracast eller USB
- Vikt 915 gram
- Ungefär 3,5 timmars kontinuerlig användning och 4 timmars laddningstid
- Li-ion-batteri
- USB-C, 3,5 mm-ljuduttag

ArtNr	Benämning	Pris
1-3050	Ruby 10	11 900:-
1-3050-02	Ruby 10 – laddare	480:-
1-3050-03	Ruby 10 – väska	480:-



Ruby 10 HD OCR

RUBY 10 är en handhållen läskamera med tre kameror för avstånd, läsning och en utökad arm för helsidesbildvisning och OCR.

Använd direkt ur lådan med intuitiva kontroller, inbyggt läsställ. Unika, patentsökta visningslägen förbättrar kontrasten och maximerar komforten.

RUBY 10 funktioner

- Förstoring från 2x till 24x
- Både pekskärm och taktila knappar
- Bärbar och lätt
- Förstora små föremål och finstilt text
- Se objekt på kort avstånd
- Spara skannade bilder och dokument
- Anslut till en extern skärm via Miracast eller USB
- Skanna och läsa helsidesdokument
- Anslut ett headset för att lyssna på dokument privat.
- Vikt 915 gram
- Ungefär 3,5 timmars kontinuerlig användning och 4 timmars laddningstid
- Li-ion-batteri
- USB-C, 3,5 mm-ljuduttag

ArtNr	Benämning	Pris
1-3055	Ruby 10 OCR	14 900:-
1-3050-02	Ruby 10 - Laddare	480:-
1-3050-03	Ruby 10 - Väska	480:-



Varje ZoomText har ett unikt serienummer, som behålls även efter uppgradering.

Till serienumret knyts en 20 teckens licenskod (ILM).

ZoomText kan även kompletteras med ett hårdvarulås, en s.k. Dongel, då upphör ILM koden.

ZoomText Magnifier

ZoomText Magnifier är ett förstoringsprogram som förstorar, förstärker all text som finns på bildskärmen. Programmet följer aktivt fokus, tex. Pekare markör eller meny.

- Enkel meny, för inställningar.
- Alla funktioner kan styras via kortkommandon.
- Förstorar från 1x upp till 60x med avrundade tydliga fonter.
- Olika förstoringspresentationer, Hela skärm, del av skärm, Rad eller lins.
- Förstärkning eller ersättning av färger på skärm, pekare och markör.
- Ändra storlek och form på Pekare och markör.
- Fokusram, som visar var aktuellt fokus är på skärmen.
- Stöd för multipla skärmar.
- ZoomText fungerar i Windows 7, 8, 10, 11.

ArtNr	Benämning	Pris
3-2100	ZoomText Magnifier	5 280:-
3-2101	ZoomText Magnifier uppgradering 1 steg	1 430:-
3-3028	USB dongel till Vispero Program (Hårdvarulås)	1 800:-



Varje ZoomText har ett unikt serienummer, som behålls även efter uppgradering.

Till serienumret knyts en 20 teckens licenskod (ILM).

ZoomText kan även kompletteras med ett hårdvarulås, en s.k. Dongel, då upphör ILM koden.

Programmet fungerar som en 40-minuters demo utan aktivering.

ZoomText Magnifer/Reader

ZoomText Magnifer/Reader är ett förstöringsprogram med talstöd som förstörar, förstärker och läser all text som finns på bildskärmen. Du får förutom förstoring även uppläst vad som står i menyer, dialoger och meddelanden.

ZoomText MagReader innehåller samma funktioner som ZoomText Magnifier, men har även:

- Vocalizer Expressive talsyntes i flera röster och språk.
- SkrivEko, Läser tecken, ord eller mening när du skriver.
- MusEko, läser texten man pekar på.
- AppLäsare, löpande läsning i dokument eller på websidor. AppVy läser all text i bilden originalvy där även bilder visas.
- TextVy, Endast texten visas i önskad storlek och färg.
- SägDet, Makera ett stycke som läses upp.
- Bakgrundsläsare, läser upp text som finns i urklipp.
- Inspelare, konverterar text i urklipp till ljudfil.
- ZoomText fungerar i Windows 7, 8, 10, 11.

ArtNr	Benämning	Pris
3-2150	ZoomText MagReader	7 260:-
3-2151	ZoomText MagReader uppgradering 1 steg	2 090:-
3-3028	USB dongel till Vispero Program (Hårdvarulås)	1 800:-
3-2030	Konvertering ZT Magnifier till MagReader	2 400:-



Varje JAWS har ett unikt serienummer, som behålls även efter uppgradering.

Till serienumret knyts en 20 teckens licenskod (ILM).

JAWS kan även kompletteras med ett hårdvarulås, en s.k. Dongel, då upphör ILM koden.

Stöd för Remote Access behövs om JAWS ska köra applikationer på en server.

JAWS PRO

JAWS för Windows är en kraftfull skärmläslösning som läser information på din bildskärm genom att använda syntetiskt tal.


JAWS tillhandahåller många användbara kommandon som gör det lättare att använda program, redigera dokument, och läsa Webbsidor.

Med en ansluten punktdisplay, kan JAWS även tillhandahålla punktutmatning som tillägg till, eller istället för tal.

En imponerande samling med allsidigt användbara verktyg och anpassningsbara funktioner låter dig skraddarsy, JAWS för dina individuella behov och önskemål.

Att använda JAWS på Internet är enkelt, så du kommer att lära dig att surfa på kort tid. Dessutom har JAWS stöd för de mest populära Office programvarorna så att du kan få möjlighet att arbeta i samma programmiljö som andra Windows datoranvändare.

ArtNr	Benämning	Pris
3-3011	JAWS Pro	17 490:-
3-3017	JAWS Pro uppgradering 1 steg	3 300:-
3-3020	Uppgradering till Remote Access	4 510:-
3-3028	USB dongel till Vispero Program (Hårdvarulås)	1 800:-

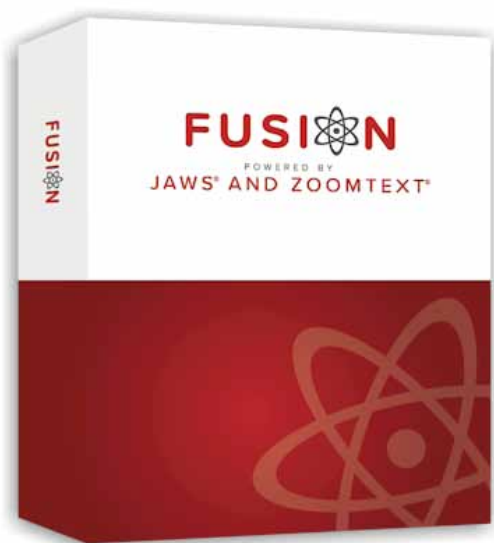

Varje Fusion har ett unikt serienummer, som behålls även efter uppgradering.

Till serienumret knyts en 20 teckens licenskod (ILM).

Fusion kan även kompletteras med ett hårdvarulås, en s.k. Dongel, då upphör ILM koden.

Programmet fungerar som en 40-minuters demo utan aktivering.

Fusion PRO

Fusion är det ultimata hjälpmedelsverktyget för personer med någon form av synnedsättning. Fusion erbjuder det bästa av båda världarna – ZoomText, med dess skärmförstoring och visuella förbättringar för att underlätta att titta på skärmen, förenat med styrkan och hastigheten hos JAWS skärmläsningss funktionalitet.

Genom att blanda ZoomText och JAWS tillsammans får Fusion flexibelt, högkvalitativt tal via användning av Eloquence samt Vocalizer Expressive, kraftfulla tangentbordskommandon inklusive navigering på webben, samt en bred uppsättning anpassningsmöjligheter.

När du har installerat Fusion, läggs tre ikoner på skrivbordet:

- ZoomText (Kan köras som Magnifier eller Mag/Reader).
- JAWS Pro.
- Fusion (Kombination av Magnifier och JAWS).

ArtNr	Benämning	Pris
3-2700	Fusion Pro	19 690:-
3-2701	Fusion Pro uppgradering 1 steg	4 620:-
3-2704	Konvertera Magnifier till Fusion	17 490:-
3-2705	Konvertera MagReader till Fusion	15 290:-
3-2706	Konvertera JAWS Pro till Fusion	7 260:-
3-3020	Uppgradering till Remote Access	4 510:-
3-3028	USB dongel till Vispero Program (Hårdvarulås)	1 800:-



OpenBook och Pearl

OpenBook 9 och PEARL kameran tillhandahåller det ultimata i portabel teckentolkning och läsning, hämtar in textbilder snabbare än någonsin tidigare. Placera pocketböcker sidledes och PEARL kommer att fånga in två sidor samtidigt.

För större böcker, som t ex textböcker, lägg bokryggen längs kanten på guiden för att fånga in en sida i taget.


OpenBook fångar in upp till 20 sidor i minuten. OpenBook's inbyggda rörelsedetektor förhindrar att en bild fångas in förrän en sida ligger rätt och är absolut still. PEARL kameran är utformad för att fånga in bra bilder i normal rumsbelysning.

Om rummet är osedvanligt mörkt, kan den inbyggda LED belysningen tändas för att ge extra ljus.

OpenBook OCR program fungerar även till en VIA / Twain kompatibel skanner.

Pearl skanner kamera fungerar även tillsammans med JAWS 2018 eller senare

ArtNr	Benämning	Pris
1-5350	OpenBook och Pearl	11 180:-
1-5348	Pearl	4 200:-
1-5355	OpenBook	8 580:-
3-3028	USB dongel till Vispero Program (Hårdvarulås)	1 800:-

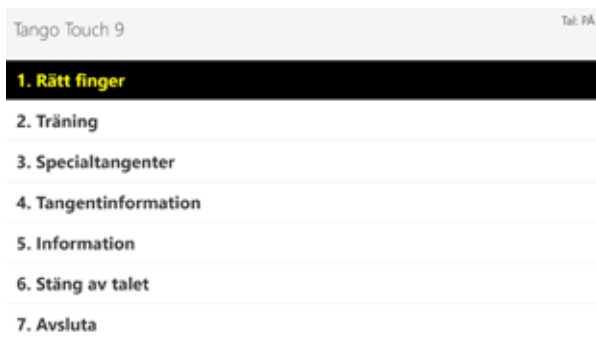


TangoTouch Tal ver 9 nedladdning

Tango Touch 9 är den senaste versionen. Den är avsedd för Window 10 eller senare. Tango Touch 9 har inbyggt tal, och någon talsyntes behövs inte.

CX Word Förenklad

Konvertering av Worddokument till punktskrift och sedan utskrift till punktskrivare.

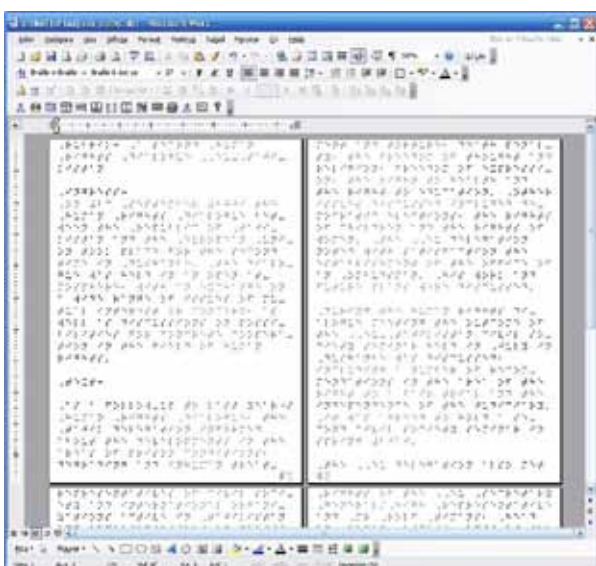

ArtNr	Benämning	Pris
3-4008	Tango Touch ver 9	1 890:-
3-4012	CX Word Förenklad	6 000:-
3-4013	CX Word Förenklad uppgradering	1 800:-




VisusMove FHD

VisusMove FHD, ett kamera system som passar både i hemmet, skolan och på arbetsplatsen.

VisusMove FHD erbjuder:

- Överlägsen bild med Full HD 1080p och 30x optisk zoom i läsläge.
- Enkel fjärrkontroll för styrning av funktioner
- Autofokus
- Referenslinje/Kuliss
- Mjukvara till PC - inklusive mjukvarubaserad splitfunktion.
- Bra arbetsavstånd
- Anslut till PC eller till en monitor/projektor
- Kompatibel med förstorande programvaror, som t ex ZoomText och Fusion
- Spara dina bilder och filmer
- Förstoring 1,6 - 85 x (22" skärm)
- Fri arbetshöjd: 29 cm
- Färglägen Naturliga färger plus 65536 artificiella färger kombinationer (positiv/negativ)
- Kameraupplösning bildskärm: 1920x1080 - Full HD
- Kameraupplösning PC: 1280x720 - HD
- Anslutningar: USB2.0, USB3.0 eller HDMI
- Mått 41 x 15 x 35 cm
- Vikt: 5 kg

ArtNr	Benämning	Pris
1-1100	VisusMove FHD	32 000:-

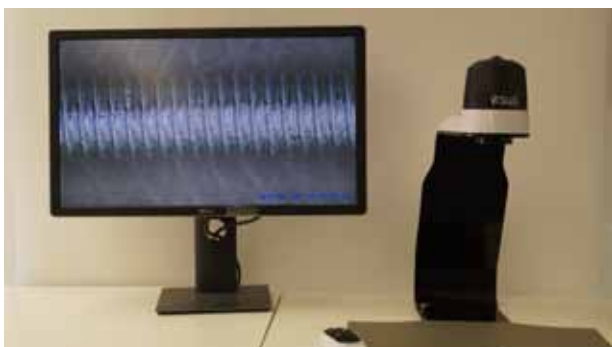

Visus CMORE PLUS

Teknikens ytterst skarpa bilder och mikroskopens förmåga att förstora Ny elektronik och kamera ger en exceptionellt skarp bildkvalitet!

Snap shot läge. Du behöver inte använda datorn för att ta en bild längre. Anslut bara ett

USB-minne till din Cmore Plus och använd snapshot på fjärrkontrollen.

Visa kristallklara bilder från 1920x1080 på HDskärmen, vilket minskar ögonbelastningen och nacktröttheten som man ofta kan se i samband med frekvent användning av traditionella mikroskop

Teknisk specifikation

Upplösning monitor	1920x1080 (Full HD)
Upplösning PC	1920x1080
Kamera	zoom x30 optisk
Autofokus	Ja
Bildfrekvens	60 fps
Arbets höjd	under kamera 280 mm
Operativ system	PC win11 / win10
Utgång	miniUSB/DisplayPort
Belysning	Inbyggd LED
Monitor storlek	Valfri
Mått	H 410mm B 170mm D 350mm
Vikt	4,5 kg

ArtNr	Benämning	Pris
1-1120	Visus CMORE PLUS	35 900:-



Teknisk specifikation

Kamerahöjd	Justerbar
Rörelse i Z	Teleskoparm
Kamerahus	Alla komponenter i en enhet
Flexibel	XYZ
Belysning	Nej/ Variation av extern belysningsalternativ
Ethernet	Ja
Monitorkrav	Full HD (rekommenderas)
Anslutningar	DP – DP
Kraft	24 W
Dimensioner	kamera 150 x 107 x 106 (mm)
Vikt	8 kg
Driftstemp	Lagring -15 C

Visus ICON

Visus teknologi har alltid strävat efter att ha de mest lättanvända produkterna på marknaden. ICON ger fler funktioner och flexibilitet än vår Cmore-modell men ändå väldigt lätt att använda. Att inte ha knappar på kamerahuset är viktigt för oss alla som har arbetat med ett inspektionsverktyg. Det är därför vi använder vår fjärrkontroll som standard.

ICON är flexibel i XYZ och passar de flesta inspektionsbehov.

Bilder kan enkelt tas med ICON med hjälp av ett USB-minne. Tryck bara på en knapp på fjärrkontrollen. Som alternativ kan bilder sparas till en dator via USB-uttag eller via ditt företags nätverk.

Användning

- Jämförelse av bilder sida vid sida.
- Överlagringsbildsjämförare.
- Dokument till nätverk – spara tid genom att ansluta din ICON till ditt nätverk.
- Optisk förstoring till 30x med standardobjektiv och snabb autofokus
- Optik och belysning.

ArtNr	Benämning	Pris
1-1140	Visus ICON	44 000:-



Visus ICON TURN+FLEX

Med ICON Flex får du exceptionellt skarpa bilder för inspektion, felanalys och mer. ICON FLEX ger fler funktioner och flexibilitet

än vår Cmore-modell men ändå väldigt lätt att

använda. Inga knappar på kamerahuset är viktigt för oss alla som har arbetat med ett inspektionsverktyg. Det är därför vi använder

vår fjärrkontroll som standard.

Bilder kan enkelt tas på ICON med hjälp av ett

USB-minne. Tryck bara på en knapp på fjärrkontrollen. Som alternativ kan bilder sparas till en dator via USB-uttag eller via ditt

företags nätverk.

Användning

- Jämförelse av bilder sida vid sida
- Överlagringsbildsjämförare.
- Dokument till nätverk – spara tid genom att ansluta din ICON till ditt nätverk.
- Optisk förstoring till 30x med standardobjektiv och snabb autofokus.
- Optik och belysning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kamerahöjd	Justerbar
Rörelse i Z	Teleskoparm
Kamerahus	Alla komponenter i en enhet
Flexibel	XYZ
Belysning	Nej/ Variation av extern belysningsalternativ
Ethernet	Ja
Monitorkrav	Full HD (rekommenderas)
Anslutningar	DP – DP
Kraft	24 W
Mått	150 x 107 x 106 (mm)
Vikt	1,05 kg
Driftstemp	lagring -15 C

ArtNr	Benämning	Pris
1-1145	Visus ICON TURN+Flex	48 430:-



Acuity FHD med tal

Läs-TV med Full HD 1080 och uppläsning. Touchskärm med många anpassningsmöjligheter och enkel hantering. taktila navigeringsramar medföljer. Som tillbehör finns även fjärrkontroll som alternativ till touch panelen.

- Autofocus kamera.
- Färg, högkontrast och artificiella färger.
- Referens och Kulisser.
- OCR tolkning av A4 dokument.
- Uppläsning av helt dokument, kolumner eller zoner.
- A3 x/y bord med bromsar.
- Kamera: Autofocus 1080P.
- Bildskärm: 22" Touch LED 1920x1080P. Förstoring: 2.2-65X (1X vid skanning).
- Storlek: 48x48x65 cm (Skärmen i högsta läge).
- Vikt: 17 Kg.
- Kontrollpanel, AC adapter, Hörlurar ingår.



Handkontroll

ArtNr	Benämning	Pris
1-4500	Acuity FHD med tal	34 000:-
1-4500-07	Kontrollpanel	2 000:-
1-4500-08	AC adapter	200:-



i-loview 13 FHD

Lätt ihopfällbar läskamera med avståndsfunktion och sminkspegel.

- 13.3" bildskärm.
- Full HD upplösning 1920x1080
- Autofocus.
- Förstoring 1.2-150X.
- 5 timmars drifttid på batteri.
- 320x373x61 mm hopfällt läge.
- Referens o kuliss funktion.
- Panorering i fryst bild.
- Vikt 3.9 kg inkl. batteri.
- Laddare, skyddsfodral och putsduk ingår.



i-loview 16 FHD

Lätt ihopfällbar läskamera med avståndsfunktion och sminkspegel.

- 15.6" bildskärm.
- Full HD upplösning 1920x1080
- Autofocus.
- Förstoring 1.4-176X.
- 5 timmars drifttid på batteri.
- 376x460x68 mm hopfällt läge.
- Referens o kuliss funktion.
- Panorering i fryst bild.
- Vikt 4.7 kg inkl. batteri.
- Laddare, skyddsfodral och putsduk ingår.

ArtNr	Benämning	Pris
1-2350	i-loview 13 FHD	22 500:-
1-2370	i-loview 16 FHD	23 800:-
1-2350-01	i-loview 13-17 - AC adapter	804:-
1-2350-02	i-loview 13-17 - batteri	1 200:-



i-loview 16 FHD Premium

Lätt ihopfällbar läskamera med avståndsfunktion och sminkspegel. Möjlighet att koppla in dator, smartphone och även koppla in extern bildskärm.

- 15.6" bildskärm.
- Full HD upplösning 1920x1080
- Autofocus.
- Förstoring 1.4-60x.
- 5 timmars drifttid på batteri.
- 381x406x62 mm ihopfällt läge.
- Referens o kuliss funktion.
- Panorering i fryst bild.
- Vikt 4.7 kg inkl. batteri.
- Laddare, skyddsfodral och putsduk ingår.



i-loview MAX FHD Premium

Lätt ihopfällbar läskamera med avståndsfunktion och sminkspegel. Möjlighet att koppla in dator, smartphone och även koppla in extern bildskärm

- 17.3" bildskärm.
- Full HD upplösning 1920x1080
- Förstoring 1.5-70x.
- 5 timmars drifttid på batteri.
- Referens o kuliss funktion.
- Panorering i fryst bild.
- Anslutning HDMI in, HDMI ut.
- Vikt 5.5 kg inkl. batteri.
- Laddare och putsduk ingår

ArtNr	Benämning	Pris
1-2375	i-loview 16 FHD Premium Svart	25 500:-
1-2390	i-loview MAX FHD Premium Svart	28 900:-
1-2350-01	i-loview 13-17 - AC adapter	804:-
1-2350-02	i-loview 13-17 - batteri	1 200:-



Onyx HD 22

ONYX HD är ett portabelt kamerasystem som används som både när och avståndskamera.

Lätt att flytta- lossa nätanslutning, vrid in kameran bakom bildskärmen och lyft i bärhandtaget.

Kameran fungerar som både när och avståndskamera.

Trådad handkontroll för Zoom och övriga inställningar av bilden.

Förstoring: 1.7x - 118x

Fri arbetshöjd under kamera: 41,6 cm.

Sökfunktion, en knapptryckning Zoomar snabbt till översikt med visuellt sökkors, och återgår sedan till vald förstoring.

Trådlös handkontroll med funktioner som:

- Fullfärg autofokus
- Högkontrast 33 olika färgkombinationer
- Sökfunktion
- "Frys bild"
- Spegelvändning
- Låsbar fokus
- Referenslinje och kulisser.
- Väska på hjul med infällbart handtag
- Vikt 6.7 Kg

ArtNr	Benämning	Pris
1-3190	ONYX HD 22	24 500:-



VisioDesk HD

Extremt lätt, och Hopfällbar närkamera med både sminkläge och avståndskamera. Batteridrift för flexibel användning.

- 15,6" bildskärm.
- Full HD upplösning 1920x1080.
- Autofocus.
- Förstoring 1.7-35X.
- 6 timmars drifttid på batteri.
- 375x375x60 mm i hopfällt läge.
- Vikt 4.8 kg inkl. batteri.
- Laddare, skyddsfodral och putsduk ingår.

VisioBook HD

Lätt ihopfällbar läskamera med avståndsfunktion och sminkspegel.

- 12,5" bildskärm.
- Full HD upplösning 1920x1080.
- Autofocus.
- Förstoring 1.8-30X.
- 4 timmars drifttid på batteri.
- 340x310x54 mm i hopfällt läge.
- Vikt 3.6 kg inkl. batteri.
- Laddare, skyddsfodral och putsduk ingår.



Avståndskamera.



Sminkspegel.



Lätt att skriva under.

ArtNr	Benämning	Pris	ArtNr	Benämning	Pris
1-6880	VisioDesk	45 000:-	1-6890	VisioBook	38 400:-
1-6880-02	Väska	1 500:-	1-6890-02	Väska	450:-



myBoardBuddy AIR

Sändaren placeras mellan bildens källa t.ex. laptop och smartboard eller projektor med en HDMI-kabel. Den överför bilden trådlöst till en mottagare eller till appen. Mottagaren är ansluten till både monitorn och joystick med enkla, färgglada knappar. På kontrollpanelen finns en lättanvänd joystick som används vid förflyttning i den förstörade bilden. Kontrollpanelen har också stora färgade knappar som används för att öka och minska förstoringen samt redigera färg och kontrast i bilden.

myBoardBuddy AIR

myBoardBuddy tillåter en synskadad elev eller anställd att se digitala presentationer från exempelvis en smartboard i ett klassrum, projektor i konferensrum på ett smart sätt.

- tillåter att man förstorar smart board- eller presentationsbilden på t ex en separat bildskärm eller till en app som installeras på surfplatta.
- är kopplad till den dator som presentationen visas från och på så vis ser eleven originalet på sin egen skärm eller surfplatta
- passar lika bra utanför klassrummet och underlättar vid exempelvis möten eller föreläsningar där det hålls digitala presentationer.
- Allt skärminnehåll visas med minimal fördröjning: text, foto, video, live-anteckningar.
- Ge synskadade anställda tillgång till digitala presentationer
- I alla moderna arbetsmiljöer finns digitala presentationsskärmar överallt.

En enkel lösning för den digitala whiteboardtavlan behövs.

My Board Buddy AIR är svaret.

Hur fungerar det ?

ArtNr	Benämning	Pris
1-4600	myBoardBuddy AIR	18 000:-
1-4600-01	myBoardBuddy Air receiver+joystick	12 000:-



Hur fungerar det ?

myBoardBuddy GO Sändaren placeras mellan bildens källa t.ex. laptop och smartboard eller projektor med en HDMI-kabel. Den överför bilden trådlöst till appen.

myBoardBuddy GO

myBoardBuddy tillåter en synskadad elev eller anställd att se digitala presentationer från exempelvis en smartboard i ett klassrum, projektor i konferensrum på ett smart sätt.

- tillåter att man förstorar smart/ board- eller presentationsbilden på t ex en separat bildskärm eller till en app som installeras på surfplatta.
- är kopplad till den dator som presentationen visas från och på så vis ser eleven originalet på sin egen skärm eller surfplatta
- passar lika bra utanför klassrummet och underlättar vid exempelvis möten eller föreläsningar där det hålls digitala presentationer.
- Allt skärminnehåll visas med minimal fördröjning: text, foto, video, live-anteckningar.
- Ge synskadade anställda tillgång till digitala presentationer
- I alla moderna arbetsmiljöer finns digitala presentationsskärmar överallt.

En enkel lösning för den digitala whiteboardtavlan behövs.

My Board Buddy GO är svaret.

ArtNr	Benämning	Pris
1-4601	myBoardBuddy GO	14 400:-




Visus Distance AVK - med joystick + remote

Med kraftfull optik ger avståndskameran en bra överblick av ett klassrum eller inzoomade detaljer.

Du kan panorera klassrummet/lokalen med joysticken.

Kameran kan kopplas in direkt mot en monitor eller till en läskamera via HDMI.

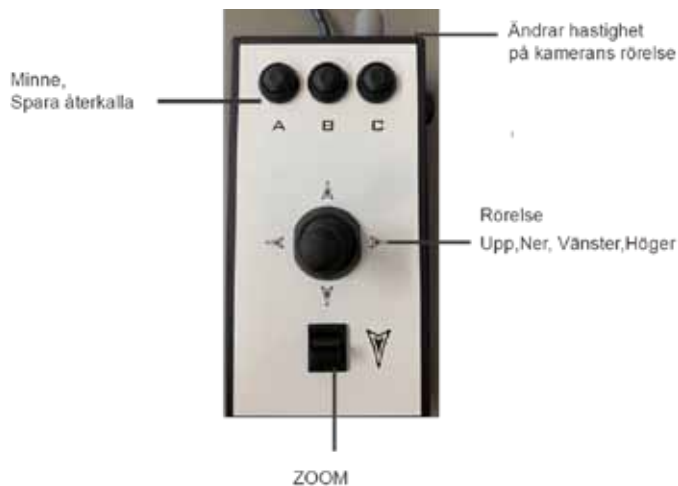

Tekniska data:

- Bildsensor SONY $\frac{1}{2.8}$ Progressive CMOS
- Pixlar 3.50 Megapixels
- Upplösning 1080p 60/50 Hertz
- Optik 20x optisk zoom
- Panorering 355° (max hastighet: 80°/s)
- Tilt -30° till +30° (max. hastighet: 60°/s)
- Fokus Auto/Manuell
- Lägsta belysning 0.1Lux
- Slutartid 1/1 ~ 1/10,000s
- Video Ut HDMI • Vikt: 5 kg

ArtNr	Benämning	Pris
1-1075	Visus Distance AVK	31 900:-



Merlin Ultra 22

Full HD En läskamera som utformad för dig som användare efter dina villkor!

Merlin ultra är en av världens mest använda läskameror av en anledning Merlin ultra ligger helt enkelt steget före vad gäller Design

Med en sober framtoning i gråa och svarta nyanser smälter Merlin in i de flesta hem. Mjuka kanter på XY bordet och rejäla taktila reglage i kontrasterande färg sättning utmärker den genomtänkta designen.

Kvalitet

Bildkvaliteten är en nyckelfaktor för Merlin. Läskameran erbjuder en bättre upplösning, klarare färger och en bild skärpa som ligger steget före. Merlin har Full HD kamera som utklassar alla standard HR och HD lösningar.

Tekniska fakta:

- Full HD kamera upplösning 1920 x 1080
- LED belysning
- Individuell anpassning av förstoringsgrad i zoom tabell (1.9 – 104 x)
- Justerbar skärm horisontellt och vertikalt.

Användning

Sätt dig framför enheten och börja använda din Merlin. Justera med enkelt handgrepp höjd och vinkel på skärmen, välj färg, förstoringsgrad och upptäck det tysta och mjukgående läsbordet. Den mjuka formen på framkanten gör läsbordet bra att vila händerna på och bidrar till en idealisk arbetsposition.

ArtNr	Benämning	Pris
1-3820	Merlin Ultra 22	24 000:-



Topaz FHD 22

Stationär läskamera med Full HD kamera för knivskarp bild. 22" skärmen kan enkelt höjas/sänkas och vinklas för bästa ergonomi.

Taktila olivfärgade reglage under bildskärmen för enkel justering av Förstoring, Ljus och kontrast.

Läskameran levereras monterad, och ansluts direkt till vägguttaget.

- Bildskärm 22" 1920x1080 FullHD
- Autofokuskamera 1920x1080 FullHD.
- Förstoring 1.7-60 gånger.
- 33 olika artificiella färger.
- Referens och kulisser.
- Belysning kan justeras eller släckas.
- Bildväxling med PC.

ArtNr	Benämning	Pris
1-3524	TOPAZ FHD 22	24 000:-



i-READER 2

- Enkel att använda
- Snabb. Från foto till uppläsning av fullskrivet A4 7 – 8 sekunder
- Dokumentbord med taktil positions märkning för bästa skanningsresultat
- Kolumnläsning
- Två svenska röster, manlig och kvinnlig
- De flesta europeiska språk medföljer
- Valbar språkidentifiering
- Laddbar
- Internt minne 1 GB eller 999 dokument
- Spara dokument via USB-uttag (t.ex. sticka)
- Går att styra via tangentbord samt namnge sparade filer
- Två bildskärmsanslutningar
- Linjeutgång
- Uppläst tid, datum, batteristatus, programversion och serienummer
- Vikt ca 3000 gram
- Transportväska med handtag och axelrem, strömadapter samt hörlurar medföljer



ArtNr	Benämning	Pris
1-4510	i-READER 2	19 900:-
1-4510-01	i-Reader - AC adapter	390:-
1-4510-02	i-Reader – Väska	390:-



Orcam Read 0,

Läsning med artificiell intelligens!

Liten handhållen kamera som med OCR-hantering och talsyntes läser upp text från alla tryckta ytor och digitala skärmar. Det gör att du kan läsa din bok, morgontidning, skyltar, menyer, dataskärm, projektorduk, smarttelefon och surfplatta.

Håll Orcam Read som en penna 15-35 cm från texten, Tryck till på startknappen för att fånga och få en text uppläst. Inbyggda lampor tänds om ljuset inte räcker till.

Utseende:

I ena änden sitter en kamera som pekar framåt, där finns även en laser som projicerar en ram eller en pil. På ena långsidan finns alla knappar samlade, Närmast kameran sitter en rund startknapp, längre upp sitter en plus och en minusknapp för volym. Sedan kommer 4 ledlampor för batteristatus, och sedan en avlång Strömknapp.

Över ströknappen finns ett USB-C uttag för laddning.

Funktioner:

Texttolkning – Tolkad text, och läser upp med talsyntes.

Klockfunktion - Röststyrning. Read meddelar aktuell tid och datum.

Inbyggd Bluetooth - som du kan använda för att ansluta till hörlurar eller en extern högtalare.

OrCam app – App för inställning av Read (Finns för iPhone eller Android).

Specifikation:

Mått 122 mm x 25 mm x 13 mm

Vikt 45 gram

Kamera 13 megapixlar

Anslutning Blåtand eller via hörlursuttag på enheten.

Nytt på Orcam Read 3: Gula knappar, fler språk, smartförstoring, AI Assistant, Streckkodsläsning.

ArtNr	Benämning	Pris
1-9240	Orcam Read 3	19 900:-
1-9230-10	Orcam Read Stativ	1 280:-
1-4630-02	Orcam Read Stand m högtalare	3 200:-



Orcam MyEye PRO

OrCam är en läskamera. En liten, diskret kamera placerad på sidan av glasögonbågen som hjälper dig att läsa upp tolkade texter från böcker, tidningar, skyltar, datorskärm, telefon m.m. Identifiera produkter man lärt in. Känna igen ansikten man lärt in. Tolka svenska sedlar. Inbyggda lampor, när ljuset inte räcker till. Bra hjälpmedel för blinda och synskadade eller personer med dyslexi.

- Infällda magneter
- On/Off knapp och linje förhöjd
- 2 röster per språk – levereras med svenska, engelska, norska, danska, finska, tyska, spanska och turkiska
- Stöd för Orcam App
- Specifikation
- Mått 76 X 21 X 14,9 mm
- Vikt 28 g
- Batteri litiumpolymer
- Kamera 13 MP

MyEye PRO

Läsning på flera språk	•
Ansiktsgenkänning	•
Produktidentifikation	•
Strekkodsigenkänning	•
Färgigenkänning	•
Pekgest	•
Stoppgest	•
Klockgest	•
Pekskärm	•

ArtNr	Benämning	Pris
1-9200	Orcam MyEye PRO	36 000 :-



SmartReader HD

Smart Reader HD är en lätt, bärbar läsmaskin med stora inbyggda användarvänliga taktila kontrollknappar. En helt integrerad lösning, Smart Reader HD erbjuder fördelen med en inbyggd HD-kamera och OCR (optisk teckenigenkänning). Smart Reader HD gör det möjligt för personer med ned-satt syn att behålla läsglädjen genom att lyssna med eller genom att fästa en bildskärm för att se texten.



Smart Reader HD-funktioner:

- Placera dokumentet och på några sekunder börjar Smart Reader läsa högt
- Perfekt för att läsa tidningar, böcker, tidningar etc.
- Inbyggd högtalare erbjuder först klassig ljudkvalitet
- Över 20 språk tillgängliga med högkvalitativa naturliga manliga eller kvinnliga röster
- Stora taktila kontrollknappar
- Inbyggt 8 timmars uppladdningsbart batteri
- Hörlursuttag
- Anslut till valfri bildskärm eller TV (HDMI och DVI) för att förstora bilden och följa med
- Optimera kontrast och ljusstyrka med över 30 tillgängliga färglägen
- Enkel bildsökning, spara och återkalla, Importera / exportera dokument via USB-port
- Vikt 1,8 kg

ArtNr	Benämning	Pris
1-5450	SmartReader HD	19 900:-
1-5450-01	SmartReader HD – fjärrkontroll	1 800:-
1-5450-02	SmartReader HD – bärväska	1 000:-
1-5450-03	SmartReader HD – AC-adapter	750:-



DotPad 320

Dot Pad taktil display gör bilder berörbara för synskadade användare

Punktskrift används i stor utsträckning av personer med synnedsättning, men trots omfattande förbättringar av tillgängligheten på webben och smarta enheter har innovationen för hårdvara för punktskriftsläsare i princip stannat av. Dot har tagit ett stort steg framåt med en smart punktskriftslösning som inte bara möjliggör enkel visning av text, utan även taktila presentation av bilder, vilket öppnar ett helt nytt sätt för utbildning och tillgängligt innehåll.

Dot Pad består av 2 400 stift i ett pixelliknande rutnät som snabbt kan ställas in för att vara i upp- eller nedläge, som bildar bokstäver i punktskrift eller lätt identifierbara former. Det är utrymme för 300 punktskriftsceller för taktila grafik, plus 20 st till i en mer traditionellt fördelad punktläsrad.

Realtid

Till skillnad från befintliga lösningar ger Dot Pad utdata med uppdaterade celler i realtid, vilket gör att användare kan läsa snabbare och enklare än någonsin tidigare.

Anslutningsmöjligheter

Dot Pad kan anslutas till iPhone eller iPad med en enkel Bluetooth- eller USB-C-anslutning. Inga extra installationer krävs.

Dubbel skärm

Dot Pad har två områden för grafik och text, vilket ger användarna möjlighet att växla mellan olika typer av innehåll.



300-cell Graphic Display

Equal distance vertically and horizontally.

4 Function Keys

Each key command can be changed through VoiceOver.

Panning Key

Left : Previous Right : Next


20-cell Text Braille Display

Standard braille distance

LED Status Indicator

Blue : Bluetooth BLE

Red : Charging/Power status

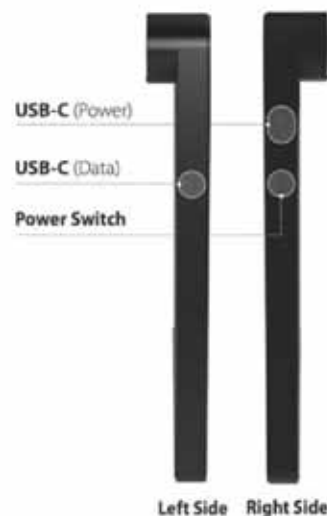

Integration

Dot Pad fungerar med iOS-skärmläsaren VoiceOver för att upptäcka och konvertera grafiska bilder till taktila för visning på dotpad.

Specifikationer

- Taktil display 300 punktceller
- Punktdisplay 20 punktceller
- Processor ARM Cortex M4 32-bit 120MHz
- RAM 64kB
- Flashminne 120kB
- Laddning 5V 3 A
- Trådlös anslutning Blåtand V5.0
- Storlek 274 x 228 x 16
- Vikt 1200 gram

ArtNr	Benämning	Pris
1-9320	DotPad 320	96 000:-



Focus 14 Blue V5

Liten smidig punktdisplay för koppling till dator, telefon eller surfplatta.

Nya modellen av FOCUS 14 är inbyggd i ett aluminiumhölje, med stötdämpande gavlar.

Koppla upp till 5 blåtandsenheter samtidigt.

- 14 teckens punktdisplay med punktinmatning.
- Frontknappar och vickknappar för enkel navigering.
- USB-C och fem blåtandsanslutningar.
- Inbyggt punkttangentbord.
- Enkel anteckningsfunktion. (Sparas på SD kort).
- Storlek: 195 x 82 x 19 mm.
- Vikt: 330 gram.
- Batteritid: 20 timmar.
- Väska, laddare och USBC kabel ingår.

ArtNr	Benämning	Pris
1-5314	FOCUS 14 Blue V5	14 900:-
1-5314-01	Väska	1 032:-
1-5340-04	Focus 14-80 V5 - Laddare	647:-



Focus 40 BU V5

Kompakt punktdisplay för koppling till dator, telefon eller surfplatta.

Nya modellen av FOCUS 40 är inbyggd i ett aluminiumhölje, med stötdämpande gavlarna. Koppla upp till 5 blåtandsenheter samtidigt.

- 40 teckens punktdisplay.
- Frontknappar och vickknappar för enkel navigering.
- USB-C och fem blåtandsanslutningar.
- Storlek: 337 x 82 x 19 mm.
- Vikt: 650 gram.
- Batteritid: 20 timmar.
- Väska, laddare och USB kabel ingår.

Gavlarna på displayen har stötdämpare.

Enheten är chocktestad enligt
US Military Standard MIL-STD-810G

ArtNr	Benämning	Pris
1-5345	FOCUS 40 BU V5	34 000:-
1-5340-01	Väska	1 032:-
1-5340-04	Focus 14-80 V5 - Laddare	647:-



Focus 40 Blue V5

Kompakt punktdisplay för koppling till dator, telefon eller surfplatta.

Nya modellen av FOCUS 40 är inbyggd i ett aluminiumhölje, med stötdämpande gavlar. Koppla upp till 5 blåtandsenheter samtidigt.

- 40 teckens punktdisplay med punkt-inmatning.
- Frontknappar och vickknappar för enkel navigering.
- USB-C och fem blåtandsanslutningar.
- Inbyggt punkttangentbord.
- Enkel anteckningsfunktion. (Sparas på SD kort).
- Storlek: 337 x 82 x 19 mm.
- Vikt: 650 gram.
- Batteritid: 20 timmar.
- Väska, laddare och USB kabel ingår.

ArtNr	Benämning	Pris
1-5340	FOCUS 40 Blue V5	36 000:-
1-5340-01	Väska	1 032:-
1-5340-04	Focus 14-80 V5 - Laddare	647:-



Focus 80 Blue V5

Stor men ändå kompakt punktdisplay. Nya modellen av FOCUS 80 är inbyggd i ett aluminiumhölje, med stötdämpande gavlar. Koppla upp till 5 blåtandsenheter samtidigt.

- 80 teckens punktdisplay med punkt-inmatning.
- Frontknappar och vickknappar för enkel navigering.
- USB-C och fem blåtandsanslutningar.
- Inbyggt punkttangentbord.
- Enkel anteckningsfunktion. (Sparas på SD kort).
- Storlek: 620 x 78 x 19 mm.
- Vikt: 1183 gram.
- Batteritid: 20 timmar.
- Väska, laddare och USB kabel ingår

ArtNr	Benämning	Pris
1-5380	Focus 80 Blue V5	98 000:-



Panoreringskontrollknappar i vardera änden av displayen
 USB C-port för laddning och anslutning
 Snabbladdningsbatteri med lång livslängd
 Kompakt, lätt och bärbar
 Vikt 750 gram
 Mått 29,5 x 9,6 x 3,3 cm
 Solid, hållbar konstruktion, resistent mot vätskor och damm
 Inkluderar ett SD-kort, laddare och en USB-kabel

Orbit Reader 40

Unik punktskrift. 40 punktceller
 Använd fristående eller ansluten till en dator eller mobil enhet. Bokläsarläge – läs dina favoritböcker och filer från SD-kort eller USB-minne. Anteckningsläge – gör anteckningar och redigera filer. Punktskriftsläge kan ansluta till 5 datorer och mobila enheter via USB och Bluetooth
 Fungerar med alla populära skärmläsare för Windows, Mac OS, iOS, Android, Chrome OS och Linux

Läs och skicka meddelanden och e-postmeddelanden. Surfa på internet och sociala medier. Styr din smartphone eller dator. Inbyggd översättning framåt och bakåt med stöd för 40+ språk

Inbyggda appar

- Klocka och alarm
- Kalender
- Kalkylator

Cursor Routing-knappar. Ljud och haptisk utgång. Växla enkelt och omedelbart mellan lägen. Fullfjädrad, högkvalitativ Perkins-stil 8-tangenters punktskrifttangentsbord. Markörplatta med 4-vägspilar och valknappar för enkel navigering

ArtNr	Benämning	Pris
1-5240	Orbit Reader 40	32 000:-



Vario 440

Vario 440 är en högkvalitativ 40-cells punktskriftsskärm för datoranvändare som behöver en kompakt, lätt lösning för användning med datorer hemma, på jobbet eller i skolan. Precis som andra BAUM/VisioBraille punktskriftsskärmar är Vario 440 en Human Interface Device (HID), vilket innebär att en drivrutin inte behöver installeras för att använda den. Vario 440 har en vändbar USB Type C-port, vilket betyder att det inte spelar någon roll åt vilket håll USB- kontakten är vänd. Vario 440 har allt du behöver för snabb tillgång till information. Dessutom är den enkel och bekväm att använda

Allt du kan förvänta dig av en kompakt punktskriftsskärm:

- Kompakt, lätt och elegant
- Lätt och bekväm att använda
- Human Interface Device (HID)
- Ny USB Typ C-port
- 40 punktceller med integrerade knappar för markördirigering
- Praktiska funktionstangenter
- Sex funktionstangenter; tre vänster och höger om punktdisplayen
- Högkvalitativt, robust hölje
- 30,1 × 6,0 × 1,7 cm
- 440 g
- USB typ C
- HID – Human Interface Device

ArtNr	Benämning	Pris
1-6440	Vario 440	38 000:-



Vario 464

Vario 464 är en högkvalitativ 64-cells punktskriftsskärm för datoranvändare som behöver en kompakt, lätt lösning för användning med datorer hemma, på jobbet eller i skolan. Precis som andra VisioBraille punktdisplayer är Vario 464 en Human Interface Device (HID), vilket innebär att en drivrutin inte behöver installeras för att använda den. Vario 464 har en vändbar USB Type C-port, vilket betyder att det inte spelar någon roll åt vilket håll USB-kontakten är vänd. Vario 440 har allt du behöver för snabb tillgång till information. Dessutom är den enkel och bekväm att använda

Allt du kan förvänta dig av en kompakt punktskriftsskärm:

- Kompakt, lätt och elegant
- Lätt och bekväm att använda
- Human Interface Device (HID)
- Ny USB Typ C-port
- 64 punktceller med integrerade knappar för markördirigering
- Praktiska funktionstangenter
- Sex funktionstangenter; tre vänster och höger om punktdisplayen
- Högkvalitativt, robust hölje

Mått och vikt

- 468 × 60 × 17 mm
- 620 g

Anslutningar/gränssnitt:

- USB typ C
- HID – Human Interface Device

ArtNr	Benämning	Pris
1-6464	Vario 464	78 000:-



Vario 480

Vario 480 är en högkvalitativ 80-cells punktskriftsskärm för datoranvändare som behöver en kompakt, lätt lösning för användning med datorer hemma, på jobbet eller i skolan. Precis som andra VisioBraille punktdisplayer är Vario 480 en Human Interface Device (HID), vilket innebär att en drivrutin inte behöver installeras för att använda den. Vario 480 har en vändbar USB Type C-port, vilket betyder att det inte spelar någon roll åt vilket håll USB-kontakten är vänd. Vario 440 har allt du behöver för snabb tillgång till information. Dessutom är den enkel och bekväm att använda

Allt du kan förvänta dig av en kompakt punktskriftsskärm:

- Kompakt, lätt och elegant
- Lätt och bekväm att använda
- Human Interface Device (HID)
- Ny USB Typ C-port
- 80 punktceller med integrerade knappar för markördirigering
- Praktiska funktionstangenter
- Sex funktionstangenter; tre vänster och höger om punktdisplayen
- Högkvalitativt, robust hölje

Mått och vikt

- 570 × 60 × 17 mm
- 760 g

ArtNr	Benämning	Pris
1-6480	Vario 480	98 000:-



VarioUltra 20

20 teckens punktdisplay med punktinmatning. Ovansidan är gjord av borstat annodiserat aluminium. Undersidan är gjord av tålig plast. Ansluts via USB och upp till 4 blåtandsenheter samtidigt. Exempelvis kan den kopplas till Jobb-PC:n, telefonen och surfplattan samtidigt. Med en enkel knapptryckning kan användaren växla från datorn över till telefonen, läsa ett SMS, skriva ett svar tillbaks. VarioUltra erbjuder även en inbyggd ordbehandlare, kalkylator, avancerad kalkylator, klocka, timer, alarm, stoppur, datumindikation och en filhanterare. Det går att spara upp till 16GB data i VarioUltras inbyggda minne.

- Vikt 340 gram
- Dimension 188 x 89 x 20 mm.
- Inbyggt minne 16 GB Flash.
- Litium-Ion-batteri för 8-12 timmars användning.
- Laddas via USB kabel eller laddare.
- Väska, laddare, USB kabel och CD med drivrutiner medföljer.



VarioUltra 40

40 teckens punktdisplay med punktinmatning. Ovansidan är gjord av borstat annodiserat aluminium. Undersidan är gjord av tålig plast. Ansluts via USB och upp till 4 blåtandsenheter samtidigt. Exempelvis kan den kopplas till Jobb-PC:n, telefonen och surfplattan samtidigt. Med en enkel knapptryckning kan användaren växla från datorn över till telefonen, läsa ett SMS, skriva ett svar tillbaks. VarioUltra erbjuder även en inbyggd ordbehandlare, kalkylator, avancerad kalkylator, klocka, timer, alarm, stoppur, datumindikation och en filhanterare. Det går att spara upp till 16GB data i VarioUltras inbyggda minne.

- Vikt 530 gram
- Dimension 316 x 89 x 20 mm.
- Inbyggt minne 16 GB Flash.
- Litium-Ion-batteri för 8-12 timmars användning.
- Laddas via USB kabel eller med laddare.
- Väska, laddare, USB kabel och CD med drivrutiner medföljer.

ArtNr	Benämning	Pris
1-6035	VarioUltra 20	37 200:-
1-6035-01	Väska	1 100:-
1-6030-02	USB laddare	350:-

ArtNr	Benämning	Pris
1-6030	VarioUltra 40	69 480:-
1-6030-01	Väska	1 500:-
1-6030-02	USB laddare	350:-



VarioPro 80

- för professionella användare

Navigeringsrullarna gör VarioPro lättanvänd och de två olika anslutningstyperna (seriell, USB) gör den ytterst anpassningsbar. Navigeringsrullarna, som är belägna på framsidan av punktdisplayen, gör det möjligt för användaren att för absolut första gången läsa utan avbrott eftersom läsfingrarna kan förbli på punktdisplayen. Rullarna kan helt enkelt hanteras med tummarna och är jämförbara med scrollhjulet på en datormus. Navigeringsrullarna låter användaren enkelt och intuitivt "scrolla" igenom texter, sidor, stycken, meningar eller ord eller i menystrukturer.

Displayerna är väldigt funktionella och deras robusta utformning i galvaniserad aluminium gör dem extremt stabila och slitstarka. Men de bibehåller fortfarande ett elegant och strömlinjeformat utseende.

Ansluts till datorn via USB eller seriell anslutning.

- Anslutningar: USB, seriell
- Matningsspänning: Via USB eller extern nätspänningsenhet (5V)
- 80 punktceller
- 4 navigeringsrullar
- 6 navigeringsknappar 3 på varje sida
- Mått 561 mm x 260 mm x 23,9 mm
- Vikt 3.7 kg

ArtNr	Benämning	Pris
1-6020	VarioPro 80	108 800:-



6DOT Präglingsbox

6dot Braille Label Maker skrivet ut tydlig punktskrift som är mycket lätt att läsa. Det går också att ansluta ett vanligt tangentbord så att även personer utan braille-erfarenhet kan skriva ut etiketter.

Funktioner:

- Ergonomiskt utformad och lätt att ta med sig och använda överallt
- Användarvänligt inbyggt tangentbord
- Ger tydlig punktskrift som är lätt att läsa
- Den inbyggda saxen ger raka fina etiketter
- Med möjlighet att ansluta ett vanligt tangentbord kan även personer utan braille-erfarenhet använda 6DOT

Specifikationer:

- Dimension: 20 cm lång, 14 cm bred, 6 cm hög
- Vikt: 0.5 kg
- Ström: Sex st AA alkaliska batterier eller nätadapter

Detta ingår i leveransen:

- 6DOT Braille Label Maker
- Strömadapter
- 10 rullar Dymo-tejp
- 6 st batterier

Braille Label Maker

- Använd den medföljande nätadaptern eller batteri
- Anpassad för standard Dymo-tejpremsor (9 mm)

ArtNr	Benämning	Pris
Art.nr. 1-5700	6DOT Präglingsbox	10 500:-



Index Everest-D V5

Punktskrivare som skriver på båda sidorna av arkmatat papper. Pappren sätts i arkmataren och kommer ut rätt sorterade, färdiga att läsas eller bindas in.

Mycket snabb skrift, 400 sidor/timme! Nytt användargränssnitt med hjälp av knappar med talstöd och märkning i både svart och punkt.

Konvertering

För att underlätta punktutskrift för enkla användning ingår Index-Direct-Braille, en drivrutin som gör det möjligt att skriva ut många PDF-filer och Word-filer direkt utan att använda något separat punktkonverteringsprogram.

Anslutning

Kan anslutas via USB, trådlöst till WIFI eller med nätverkskabel direkt till ett nätverket och ge den en egen IP-adress. Wi-Fi AirPrint stöd. Det finns stöd för mobiltelefoner och surfplattor. Det går alltså, med hjälp av punktkonverteringsfunktionen Index Direct Braille att trådlöst skicka filer från portabla enheter för utskrift på Everest-D.

Det går även att skriva ut filer direkt från ett USB-minne.



ArtNr	Benämning	Pris
1-5520	Everest-D V5	39 500:-
1-5520-10	Index Ljudhuv	9 900:-



Index Basic-D V5

Punktskrivare som skriver på båda sidorna av traktormatat papper.

Mycket snabb skrift, 100 tecken per sekund. Ställs in med hjälp av en helt ny mer lättarbetad kontrollpanel med talstöd och märkning i både svart och punkt. 'Oändliga' möjligheter att ställa in punktskriften. Snygg design!



Anslutning

Kan anslutas trådlöst till WIFI eller med nätverkskabel direkt till ett nätverket och ge den en egen IP-adress. Andra möjliga anslutningsalternativ är skriveport, serieport och USB.

Det finns stöd för mobiltelefoner och surfplattor.

Konvertering

För att underlätta punktutskrift för enklare användning ingår Index-Direct-Braille, en drivrutin som gör det möjligt att skriva ut många PDF-filer och Word-filer direkt utan att använda något separat punktkonverteringsprogram.

- Storlek: 18 x56 x25 cm.
- Vikt: 7,6 Kg.



ArtNr	Benämning	Pris
1-5525	Index Basic-D V5	30 500:-
1-5520	Index Ljudhuv	9 900:-



Index BrailleBox V5

Produktionsskrivare för lösblad med arkmatare för 400 papper.

Skriver 800 sidor per timme. Mycket låg ljudvolym vid utskrift.

Helt nytt användargränssnitt med svenskt tal.

Anslutningsalternativ

Kan anslutas trådlöst till WIFI eller med nätverkskabel direkt till ett nätverket och ge den en egen IP-adress. Andra möjliga anslutningsalternativ är skrivarpport, serieport och USB.

Konvertering till punktskrift

För att underlätta punktutskrift för enklare användning ingår Index-Direct-Braille, en drivrutin som gör det möjligt att skriva ut många PDF-filer och Word-filer direkt utan att använda något separat punktkonverteringsprogram. Fungerar till Windows 7, 8, 10, 11, Mac 10.0 och senare och Linux Ubuntu 10.04.

Tekniska uppgifter

- Storlek; 56 x 72 x 90 cm
- Vikt; 68,2 kg
- Ljudnivå; 60 dB(A)
- Effektförbrukning; max 400 W, påslagen men skriver ej 5 W, viloläge 1 W

ArtNr	Benämning	Pris
1-5510	Index BrailleBox V5	139 000:-



Specifikationer:

- Utskriftshastighet: Upp till 120 CPS
- Dokumenthastighet: Upp till 400 sidor/timme (A4)
- Utskriftsläge: Enkelsidigt eller dubbelsidigt (Interpoint)
- Grafiska punkthöjder: Variabel för färgrepresentation
- Punktskriftshöjd: Justerbar i 3 nivåer
- Pappersbredd: 176 - 305 mm
- Pappersformat: Enkelblad (50+ ark)
- Pappersvikt: 90 - 200 gram
- Anslutning: USB (1.1, 2.0), Ethernet
- Kompatibilitet: Windows 7, 8, 10 och 11
- Höjd: 158 mm
- Bredd: 557 mm
- Djup: 275 mm
- Vikt: 9 kg

ViewPlus Delta 2

Punktskrift med TigerPlus Grafik

Den nya Power-Dot punkten, är den starkaste, mest tillförlitliga och mest läsbara punktskriftspunkten hos samtliga skrivbordspunktskrivare.

ViewPlus Delta 2 använder 13 hammare för att skriva punktskrift och skapa högupplöst taktill grafik med variabla punkthöjder på pappret.


Skriv ut dubbelsidig punktskrift med släta, runda punkter för förbättrad läsbarhet.

Använd enkelbladspapper med upp till 12-tums bredd

Med arkmatare, enkel anslutning och installation

Punktskriftspunkten kan justeras i höjd, så att användaren kan anpassa denna till läsarens individuella känslighet. Detta gör läsning av punktskrift enklare, samtidigt som oöverträffad detalj behålls när taktila bilder skrivs ut. Färger göras beröringsbara genom att färger representeras genom olika punkthöjder.

ArtNr	Benämning	Pris
1-5640	ViewPlus Delta 2	45 900:-
1-5640-01	Tiger Box WIFI braille-on-the-fly	2 900:-

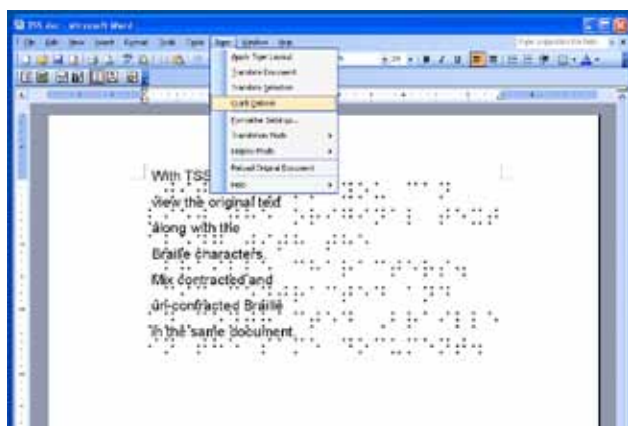

Viewplus SpotDot

Text 50 tecken per sekund

Både punkt och färgutskrift

Hög kvalitet enkelsidig punktskrift

Arkmatning

- Konvertering- och grafikredigeringsprogram
- Taktill Upplösning: 20 DPI
- Taktill grafisk höjd: 7 steg för färgåtergivning
- Punkthöjd: Justerbar i 3 höjder

Utskrift

- Färg Upplösning: 300 DPI
- Färgutskriftskvalitet: Best, normal, utkast
- Svart bläck: Hewlett Packard Typ 56 Svart
- Color Ink: Hewlett Packard Type 57 Tri-Color
- Utskriftsbredd: 203 mm

Papper

- Papper Bredd: 110 - 216 mm
- Papper: Automatisk arkmatning
- Pappersmagasin Kapacitet: 150 ark kopiera, 60 ark Braille papper
- Pappersvikt: 50-230 g
- Anslutning: USB (1,1, 2,0)
- Kompatibilitet: Windows 7, 8, 10 och 11

Mått / vikt

- Höjd: 178 mm
- Bredd: 610 mm
- Djup: 432 mm
- Vikt: 11 kg

ArtNr	Benämning	Pris
1-5610	Viewplus SpotDot	84 600:-
1-5640-01	Tiger Box WIFI braille-on-the-fly	2 900:-



Mountbatten Braille Tutor

Punktmaskin, skrivare, kommunikation och spel

Första teknikinteraktionsmöjligheten för gravt synskadade barn och ungdomar

Modernt punktskriftsverktyg

Ombärlig för att förstå nya begrepp (sida, stycke, textrad, inriktning etc.)

Ovärderlig hjälp för lärare och föräldrar

Bra för barn med flera funktionshinder

Utbildning genom nöje, spel och scenarier. Underlättar interaktion med

kamrater

Funktioner

Enkel att skriva på med smidigt avtagbart punkt tangentbord

Menystyrd visuell display

Syntetiskt tal eller akustiskt ljud – möjlighet att ändra språk

Snabb och tyst punktutskrift, eller utskrift till vanlig svartskrivare

Tvåvägs skriv och punkt konversation

USB eller trådlös kommunikation

Internetdelning av resurser, spel och scenarier


Klocka, matematik, musikkläge

Praktiskt taget obegränsat minne, molnanslutning

Specifikationer

- Dimensioner: 408 x 160 x 101 mm
- Vikt 3.9 kg
- Uppladdningsbart internt Li-Ion batteri
- Batteritid: 240 timmar användning, 7 timmar punktutskriftsläge
- Följande medföljer: AC-adapter

ArtNr	Benämning	Pris
1-5710	Mountbatten Braille Tutor	32 000:-

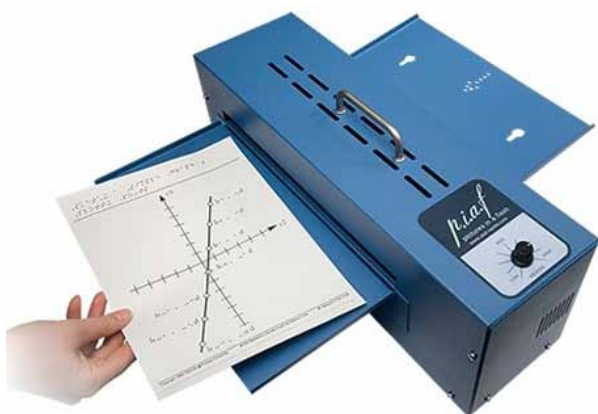

Harpo PIAF

Svällpappersvärmare av hög kvalitet med reglerbar effekt. Klarar A3-papper. Snabb och lätt att använda. Ger pipsignal när nästa papper kan laddas.

Gör en bild på ett svällpapper antingen genom att rita för hand direkt på pappret, genom att kopiera bilden till svällpappret med en kopieringsmaskin eller använd din PC och din skanner för att skapa den text och grafik som önskas. Hur mycket pappret värms ställs in med ratten till vänster på maskinens ovan-sida.

Lägg pappret, med ovensidan uppåt, mot inmatningsplåten (med pilen) och för in det i P.I.A.F tills pappersmatningen tar tag i pappret och matar det genom värmaren.

När P.I.A.F. är klar hörs ett pip.

Specifikationer

- Storlek utan matningsplåtar: 190 x 500 x 148 mm
- Storlek med monterade matningsplåtar: 190 x 500 x 510 mm
- Vikt: 6 kg
- Färg: Blå

ArtNr	Benämning	Pris
1-5740	Harpo PIAF	9 700:-
1-5740-01	Svällpapper A4	9:-
1-5740-02	Svällpapper A3	17:-
1-5740-03	Penna till svällpapper, smal 1-4 mm	64:-
1-5740-04	Penna till svällpapper, bred 2-7 mm	96:-



Tel: 010-455 04 00

E-post: info@insyn.se

www.insyn.se



ISO 9001 / ISO 14001

